


ERGOCYCLE SEMI-ALLONGÉ	600	CARDIO	CAR650
Nom	Série	Gamme	Référence

FABRIQUÉ
EN FRANCE 



CARACTÉRISTIQUES

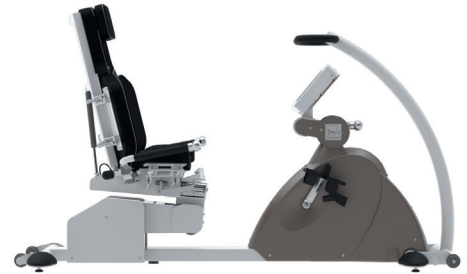

STANDARD

Siège à mémoire de forme



STANDARD

Siège releveur électrique



STANDARD

Dossier réglable

Caractéristiques standard

- En option : Bras de pédale réglables en longueur
- Accessibilité du châssis étudiée pour faciliter l'enjambement
- Potence d'aide à l'accessibilité
- Siège releveur électrique avec réglage en profondeur et largeur
- Transmission par courroies souples & silencieuses équipées d'un système automatique de tension
- Freinage par système électromagnétique à courant de Foucault

Programmation & électronique

- 30 programmes personnalisables
- 1 programme à puissance ou pulsation constante & 12 pré-établis
- Capteur de pulsation compatible «Polar»
- Affichage «Graphic» : LCD
- Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min), distance (km), temps (min:sec), calories consommées (kcal)
- En option : Connexion logiciel «RS 232»

MESURES / INFOS

Designations	Mesures
Alimentation	230V - 50Hz - 2A
Châssis	Mécano-soudé / Machine-welded
Encombrement	260 x 105 x 170 cm
Poids	180 kg
Poids utilisateur max	250 kg
Langues	5